




智慧医疗 随心所“镜”

EndoFresh® 一次性电子消化内镜系统
全球首款同时持有NMPA、FDA及CE认证的一次性
消化内镜产品
产品受数百专利保护

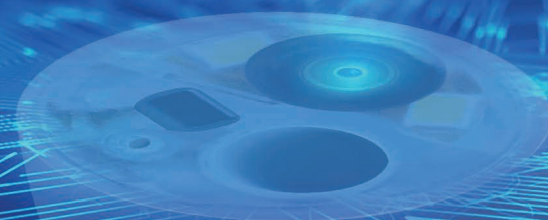

高清 集成
智能 便携




深圳市先赞科技有限公司
Shenzhen Xzing Technology Co.,Ltd.
深圳市南山区深圳湾科技生态园10A5层
Tel:0755-86576106

岱川医疗（深圳）有限责任公司
Daichuan Medical (SHENZHEN) Co.,Ltd.
广东省深圳市坪山区生物医药创新产业园
Tel:0755-89668350


 www.endofresh.com/cn

如需更多产品信息和业务咨询，请访问：www.endofresh.com/cn或联系：dcyl@endofresh.com，Endofresh商标、相关产品标识和专利由岱川医疗(深圳)有限公司持有。未经岱川医疗(深圳)有限公司许可，不得以任何方式复制。相关禁忌或注意事项请参阅产品手册，岱川医疗(深圳)有限公司保留所有权利，任何产品信息和规格修改以产品手册为准(本手册仅供内部使用)。


Ver: 20250616

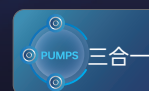


精准辅助内镜下病灶识别

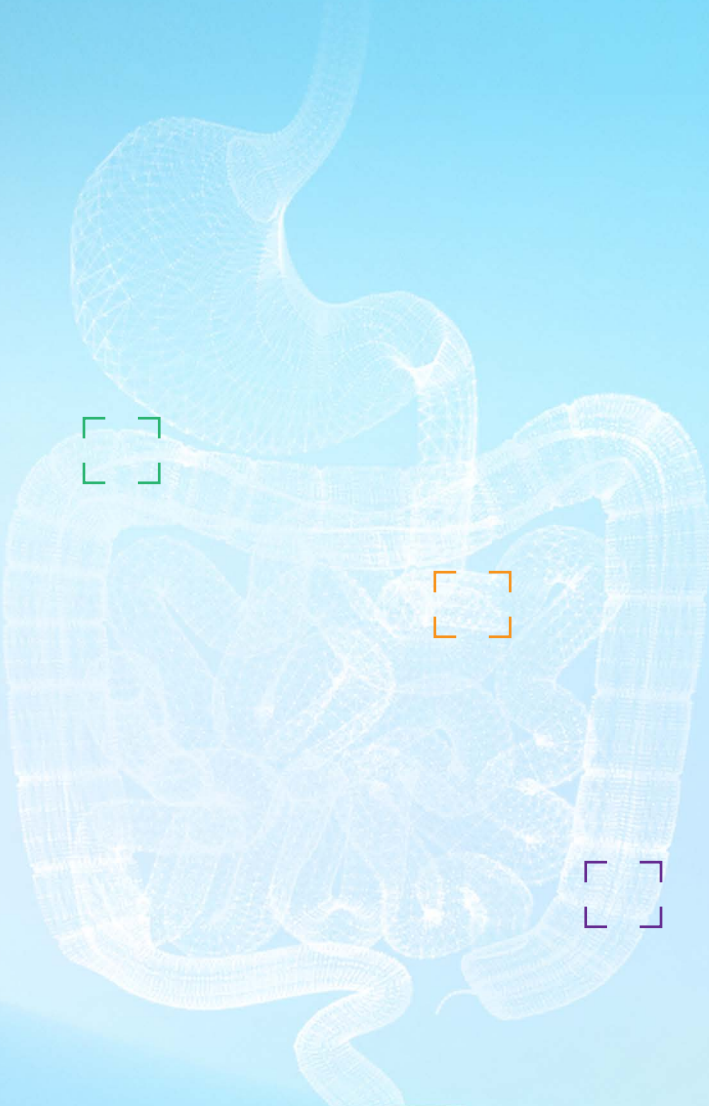

- 良性病变
- 疑似早癌及癌前病变
- 疑似进展期癌

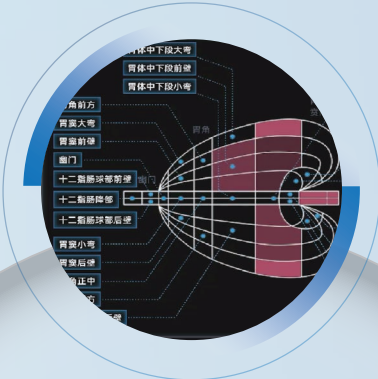

融合AI
精准辅助内镜下病灶识别

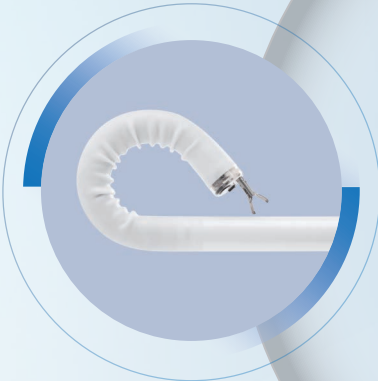

大角度 210°
操控更加精准，
直达复杂病变部位



4.2mm 大钳道
兼容更多器械，
吸引效率更高



900mm 特殊短治疗镜
方便操作，专为治疗而生



一人一镜，安全放心



无菌包装，用后即弃



无需维护，降低成本

AI智能助力

智能精准筛查

实时识别异常黏膜特征，可提示 HP 感染和静脉曲张风险

全流程质控导航

内置标准化检查路径，规范操作流程，兼检共治

可视化管理与赋能


全流程自动保存截图，助力沉淀标准化数据

多维度功能集成

含语音操控、图像增强、多模式切换等功能


智能识别HP感染风险

风险低为蓝色图标，风险高为红色图标，帮助医生判断患者的HP感染风险情况。

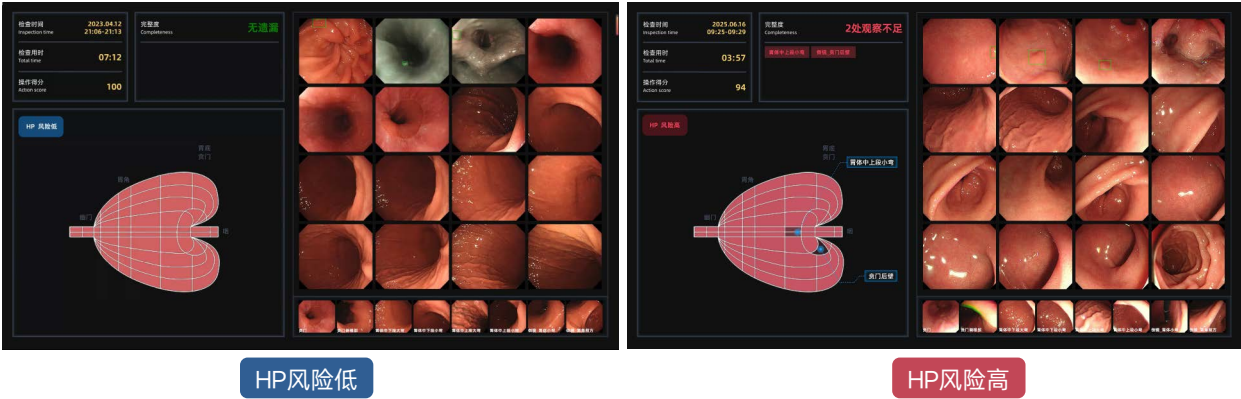


黏膜异常检测

自动框选异常部位并进行病灶三分类，用不同颜色标框提醒，判定准确率 > 95%。

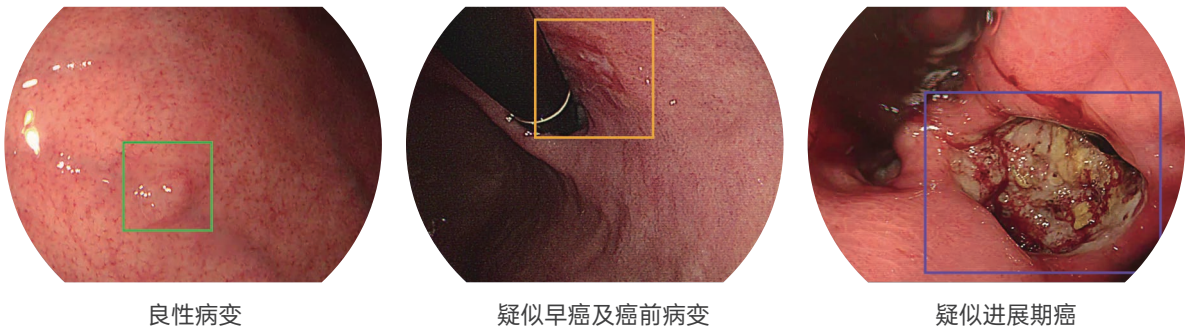


遗漏部位提示

系统将上消化道区分为**31**个区块，实时点亮已检查部位，遗漏部位一目了然。

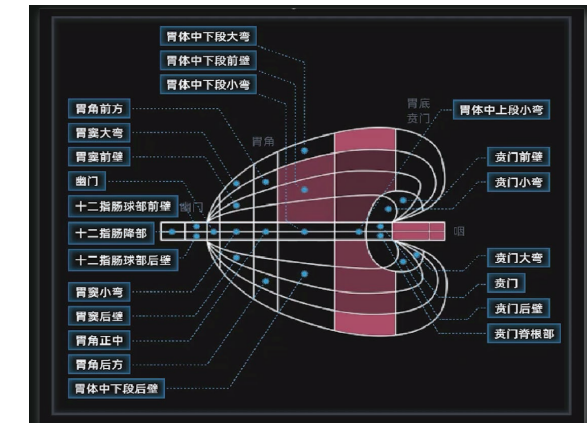

退镜过快提示

超速退镜时，内镜视野会显示红色闪烁边框实时提醒。

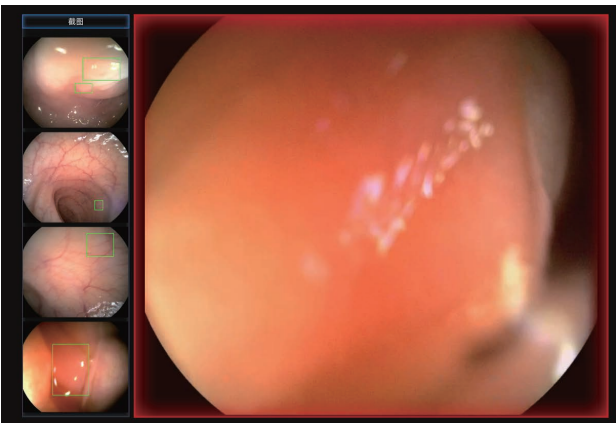

图像增强模式



质控数据一览

可统计盲肠插镜成功率、肠道准备优良率、退镜时间≥6分钟率等质控指标，辅助科室数据管理。

病人姓名：

医生姓名：

全部

搜索

内镜类型：

胃镜

操作时间：

2025-06-16 00:00:00

 ~

2025-06-16 23:59:00

重置

统计结果

导出病例详情

导出搜索结果

查询结果 3 项

清空

平均分：61.67


平均用时：00:04:03

检查合格率：33.33%

检查完整率：0.0%

提示：点击表头的列标题，可以按列对结果排序

序号	内镜类型	患者	医生	检查时间	用时	遗漏部位数量	分数	HP阳性风险	活检部位	有效视野比例	操作
1	胃镜	NULL	NULL	2025-06-16 09:14:29	00:05:15	20	34.0	低	十二指肠降部	58.3%	查看视频 打开所在位置
2	胃镜	NULL	NULL	2025-06-16 09:20:26	00:02:57	13	57.0	低		76.96%	查看视频 打开所在位置
3	胃镜	NULL	NULL	2025-06-16 09:25:06	00:03:57	2	94.0	高		90.14%	查看视频 打开所在位置

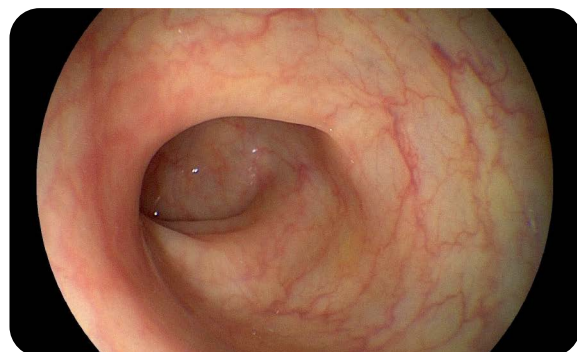


高清成像

200万像素CMOS图像传感器，高清呈现病灶细节。



功能集成

气泵、水泵、吸引泵三泵合一，安装便捷。

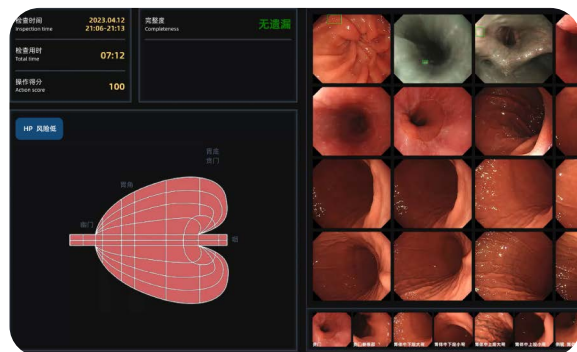

AI智能辅助

AI 深度融合，实现更精准，更规范，更高效诊疗。



安全轻便

主机重量 < 10.5kg，轻松移动易流转。

临床应用价值



降低漏诊风险



提升检查质量



助力疾病管理



赋能教学培训