



便捷 无菌
随时 可及

一次性消化内镜 解决方案

EndoFresh® 一次性电子消化内镜系统
全球首款同时持有NMPA、FDA及CE认证的一次性消化内镜产品




深圳市先赞科技有限公司
Shenzhen Xzing Technology Co.,Ltd.
深圳市南山区深圳湾科技生态园10A5层
Tel:0755-86576106

岱川医疗（深圳）有限责任公司
Daichuan Medical (SHENZHEN) Co.,Ltd.
广东省深圳市坪山区生物医药创新产业园
Tel:0755-89668350

www.endofresh.com/cn

如需更多产品信息和业务咨询，请访问：www.endofresh.com/cn或联系：dcyl@endofresh.com，Endofresh商标、相关产品标识和专利由岱川医疗(深圳)有限公司持有。未经岱川医疗(深圳)有限公司许可，不得以任何方式复制。相关禁忌或注意事项请参阅产品手册，岱川医疗(深圳)有限公司保留所有权利，任何产品信息和规格修改以产品手册为准(本手册仅供内部使用)。

Ver: 20250507

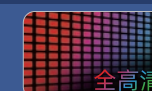

为什么选择EndoFresh®？



高集成系统
气泵、水泵、吸引泵三泵合一
随时随地开展诊疗。



性能卓越
全高清画质及优秀操控性能
满足日常诊疗需求。



兼容性佳
适配常见耗材，无缝兼容，
满足多种治疗场景。



灭菌一次性包装
最大程度降低感染风险



多元化临床使用场景
便携式设计，应用不局限于内镜中心




降低投入及运营成本
设备价格友好，无需设置洗消中心，后期免维护



特殊传染病
保护医患免受交叉感染



特殊术式操作
无惧操作时损伤镜体

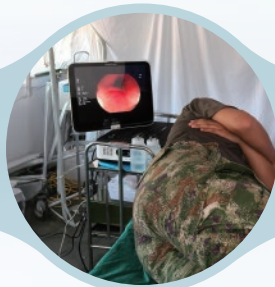

急诊抢救
提高响应时效




简化培训
降低操作门槛



外科手术
符合无菌标准

快速适配，简易操作
XZING-S2 内窥镜图像处理器

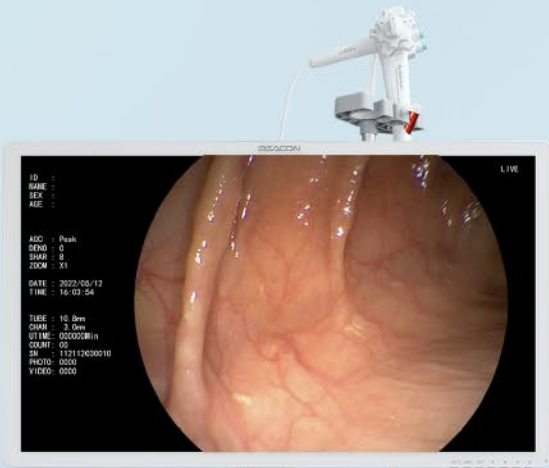


随时随地开展诊疗
GEC-2000P 便携式内窥镜图像处理器




型号	XZING-S2
电源	100-240V~, 50/60Hz
尺寸（长×宽×高）	370×435×160 mm
重量	10.5 kg
集成显示屏	/
工作站	/
白平衡	有
送气	有
辅助送水	有
内置吸引	有
二氧化碳供应	连接二氧化碳调节单元后可用
输出端口	USB, DVI


型号	GEC-2000P
电源	100-240V~, 50/60Hz
尺寸（长×宽×高）	375×440×149.5 mm
重量	15 kg
集成显示屏	有
工作站	有
白平衡	有
送气	有
辅助送水	有
内置吸引	有
二氧化碳供应	连接二氧化碳调节单元后可用
输出端口	USB, HDMI
记录文件格式	视频（AVI或MP4）、图像（JPG）

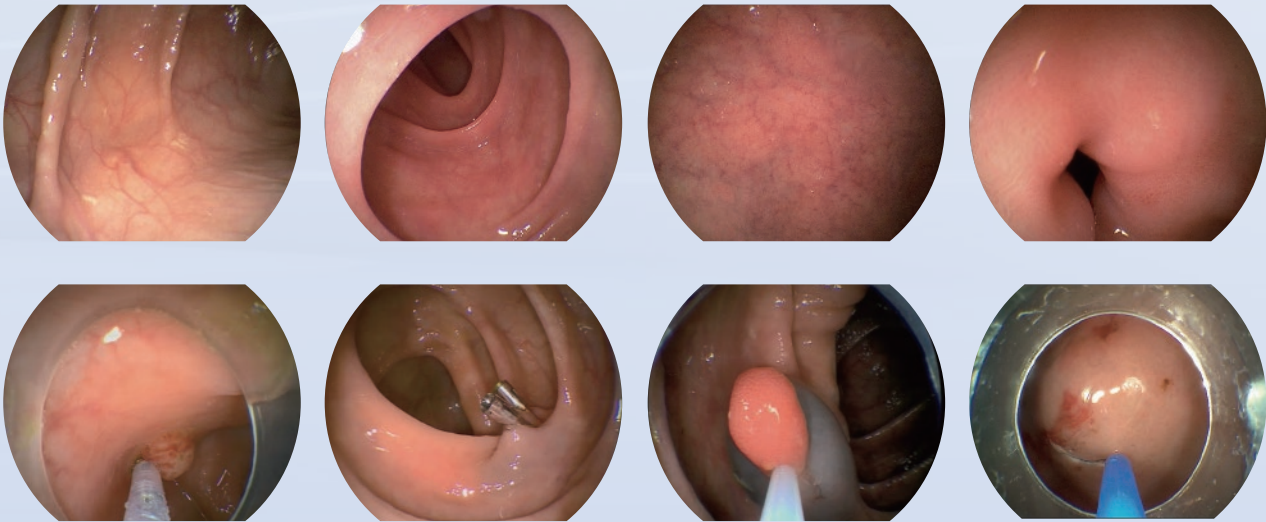

一次性消化内镜

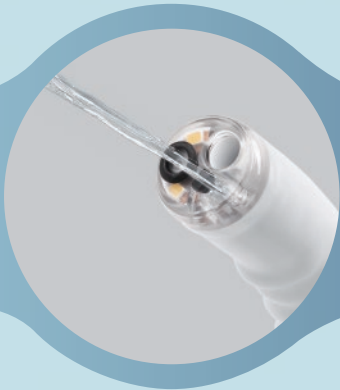

全系内镜，
标配副送水功能

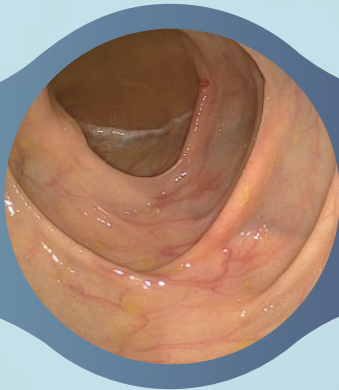

200万像素CMOS图像传感器，
全高清成像



内镜操作手柄重量<250g，
减轻手腕压力




支持热插拔及快速启停功能，
避免交叉污染



独立密封包装，
性能稳定无忧

EndoFresh® 按照传统内镜设计，
无需学习适应，不改变操作习惯。

EndoFresh® 所有内镜和图像处理器
均可相互兼容。

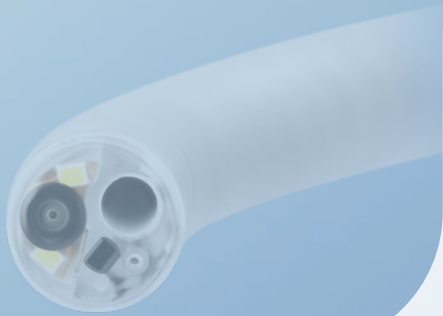

200系列
常规检查的性价比之选

200系列适用于常规上消化道和下消化道内镜检查。

	胃镜	结肠镜
型号	XZING-W200B	XZING-C200B
视野	140°	140°
景深	3-100 mm	3-100 mm
照明	LED	LED
工作长度	1300 mm	1300 mm
器械通道内径	3.2 mm	3.2 mm
插入部外径	11 mm	14 mm
弯曲角度范围	上 180° 下 160° 左 160° 右 160°	上 180° 下 180° 左 160° 右 160°

300系列
治疗力提升

210°
向上角度

3.8~4.2 mm
器械通道

多种长度选择

300系列结合临床治疗需求，大角度和大钳道设计，操作灵活，专为治疗而生。更有900mm长度内镜选择，提高治疗效率，优化操作体验。

	胃镜		结肠镜	
型号	DG-R300M	DG-T300S	DC-T300M	DC-T300S
视野	140°	140°	140°	140°
景深	3-100 mm	3-100 mm	3-100 mm	3-100 mm
照明	LED	LED	LED	LED
工作长度	1100 mm	900 mm	1300 mm	900 mm
器械通道内径	3.8 mm	3.8 mm	4.2 mm	3.8 mm
插入部外径	10.8 mm	10.8 mm	13 mm	10.8 mm
弯曲角度范围	上 210° 下 160° 左 160° 右 160°		上 210° 下 180° 左 160° 右 160°	